


ISTRUCCIONES para INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO “NEGATOSCOPIOS LED”

INSTALACIÓN :

- Colgar en la pared, utilizando los agujeros especiales en forma de llave, en la parte posterior (Fig. 5).

USO :


- **Encendido:**
 - Conectar la toma de corriente con el cable suministrado (Fig. 1).
 - Establecer el interruptor principal en 1 (Fig. 1); Se ilumina el punto en la pantalla (Fig. 2).
 - Encendido manual: el sector se enciende presionando el botón "on / off" (Fig. 2); la pantalla muestra el grado de regulación de 0 a 9, memorizado en el último encendido (Fig. 3).
 - Presione el botón si desea el modo "Automático" (Fig. 2); aparece en la pantalla "A" de Automático (Fig. 4); el sector se ilumina por contactos cuando se inserta la placa (Fig. 6).
- **Regulación :**
 - Aumentar o disminuir la intensidad de la luz, usando los botones (Fig. 2).

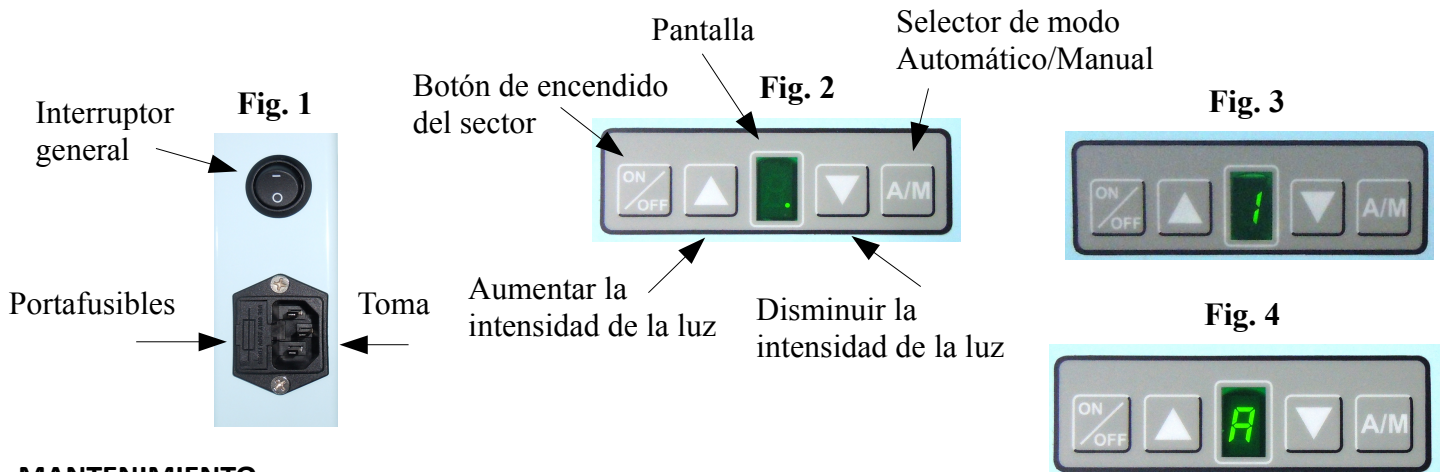

MANTENIMIENTO :

- Para limpiarlo, utilice un paño suave y productos que no contengan alcohol o disolventes.
- Para acceder al interior, desatornillar el panel posterior (Fig. 5); operación a realizar por personal especializado (tornillos en el borde).

Contactos para el modo “Automático”

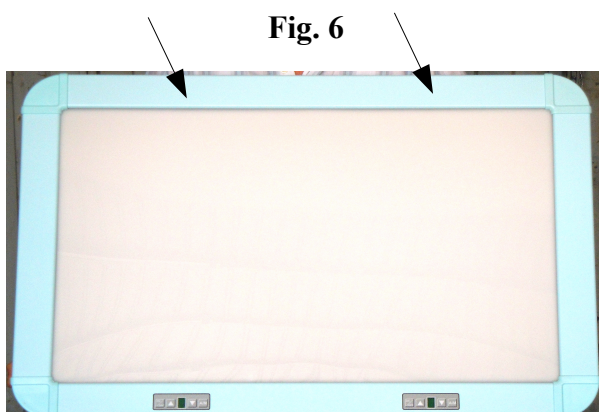

Tornillos en el borde

Agujero en forma de llave

